




**BIOPTRON<sup>®</sup>**   
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepher Group

ФІЛЬТРИ

УКРАЇНСЬКИЙ (UA)

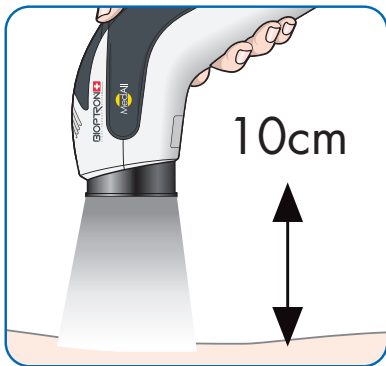

1



2



3



4

## СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

З відстані 10 см розташуйте пристрій BIOPTRON з потрібним фільтром для охоплення зони, яку ви бажаєте обробити (Рисунок 1). При обробленні ділянок, розмір яких перевищує діаметр кольорового фільтра, обробляйте їх по черзі відповідно до рекомендованого часу.

## ЗМІНА ФІЛЬТРА

Обережно та без зусиль вийміть фільтр (Рисунок 2), який треба замінити, і вставте фільтр потрібного кольору, як показано на Рисунку 3. Утримуйте зовнішнє кільце фільтра, а не лінзу.

## ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА (Рисунок 4)

1. Зніміть фільтр з виробу, утримуючи зовнішнє кільце фільтра.
2. Використовуйте м'яку вологу тканину без ворсу, щоб не подряпати скляну поверхню.
3. Висушіть фільтр іншою тканиною без ворсу.

## ГАРАНТІЯ:

- 5 років за умови використання за призначенням та дотримання попереджень
- Ця гарантія поширюється на дефекти матеріалу та виготовлення
- Ця гарантія не поширюється на естетичні зміни, спричинені звичайним зносом, які не впливають на роботу виробу, або пошкодження, спричинені неправильним його використанням.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Не використовуйте будь-які хімічні речовини (наприклад, ізопропіловий спирт) для очищення внутрішнього або зовнішнього боку скляної поверхні та кільця фільтра.
2. Зберігайте фільтр у захисній сумці для запобігання накопиченню пилу та зміні кольору через вплив сонячного світла.
3. Фільтр виготовлено з крихкого скла, тому треба поводитися з ним обережно!
4. Користувачеві заборонено знімати лінзу фільтра.



PMD-ME145-22-UA  
BIOPTRON FILTER IFU



**BIOPTRON AG**  
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND  
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



**WWW.BIOPTRON.COM**

У К Р А Ї Н С Ь К И Й ( У А )