




**BIOPTRON<sup>®</sup>**   
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

Φ Ι Λ Τ Ρ Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ ( G R )

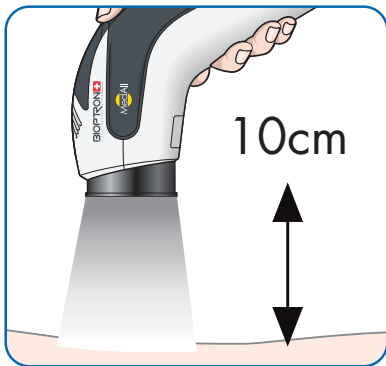

1



2



3



4

## ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Από απόσταση 10 cm, τοποθετήστε τη συσκευή BIOPTRON με το επιθυμητό φίλτρο ώστε να καλύψετε την περιοχή που θέλετε να υποβάλετε σε θεραπεία (Εικόνα 1). Κατά τη θεραπεία περιοχών μεγαλύτερων από τη διάμετρο του έγχρωμου φίλτρου, υποβάλετε σε θεραπεία τις περιοχές μία προς μία σύμφωνα με τον συνιστώμενο χρόνο.

## ΤΡΟΠΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

Αφαιρέστε προσεκτικά και χωρίς δύναμη το φίλτρο (Εικόνα 2) που πρόκειται να αντικατασταθεί και τοποθετήστε το επιθυμητό έγχρωμο φίλτρο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. Κρατήστε τον εξωτερικό δακτύλιο του φίλτρου και όχι τον φακό.

## ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (Εικόνα 4)

1. Αφαιρέστε το φίλτρο από τη συσκευή κρατώντας τον εξωτερικό δακτύλιο του φίλτρου.
2. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί χωρίς χνούδι για να μην προκληθούν γρατσουνιές στη γυάλινη επιφάνεια.
3. Στεγνώστε το φίλτρο με ένα άλλο πανί χωρίς χνούδι.

## ΕΓΓΥΗΣΗ:

- 5 έτη εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται και εάν τηρούνται οι προειδοποιήσεις
- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει ελαττώματα στα υλικά και στην κατασκευή
- Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αισθητικές αλλαγές που οφείλονται σε συνήθη φθορά και δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος ή ζημιές που προκαλούνται από την εσφαλμένη χρήση του προϊόντος.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες (π.χ. ισοπροπυλική αλκοόλη) για τον καθαρισμό της εσωτερικής ή της εξωτερικής πλευράς της γυάλινης επιφάνειας και του δακτυλίου φίλτρου.
2. Αποθηκεύετε το φίλτρο σε προστατευτική θήκη για να αποφευχθεί η συσσώρευση σκόνης και ο αποχρωματισμός λόγω έκθεσης στο ηλιακό φως.
3. Το φίλτρο κατασκευάζεται από εύθραυστο γυαλί και, επομένως, ο χειρισμός του πρέπει να γίνεται με προσοχή!
4. Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του φακού του φίλτρου από τον χρήστη.



PMD-ME145-22-GR  
BIOPTRON FILTER IFU



**BIOPTRON AG**  
SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND  
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



**WWW.BIOPTRON.COM**

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (GR)