




BIOPTRON® 
HYPERLIGHT THERAPY SYSTEM By Zepter Group

F I L T E R I

H R V A T S K I (H R)

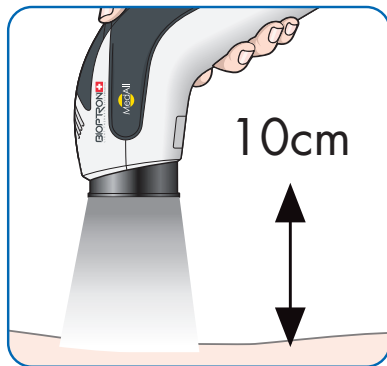

1



2



3



4

NAČIN KORIŠTENJA

Postavite BIOPTRON uređaj s odabranim filterom na udaljenost od 10 cm tako da obuhvatite područje koje želite tretirati (Slika 1). Kada tretirate područja koja su veća od promjera filtera u boji, tretirajte ih jedno po jedno, u skladu s preporučenim vremenom tretiranja.

KAKO ZAMIJENITI FILTER?

Pažljivo izvadite filter koji želite zamijeniti, bez upotrebe sile (Slika 2), i umetnite filter željene boje kako je prikazano na Slici 3. Držite vanjski prsten filtera radije nego leću.

KAKO OČISTITI FILTER? (Slika 4)

1. Izvadite filter iz uređaja tako da držite vanjski prsten filtera.
2. Koristite meku, mokru krpu koja ne ostavlja dlačice kako biste izbjegli da se staklena površina izgrebe.
3. Osušite filter drugom krpom koja ne ostavlja dlačice.

JAMSTVO

- 5 godina ako se upotrebljava u skladu s namjenom i ako se poštuju upozorenja
- Ovo jamstvo pokriva materijalne i proizvodne nedostatke
- Ovo jamstvo ne pokriva estetske promjene koje nastanu iz uobičajene uporabe te ne utječu na performanse proizvoda niti štetu uzrokovanu nepravilnom uporabom.

UPOZORENJA

1. Ne upotrebljavajte nikakve kemikalije (npr. izopropilni alkohol) za čišćenje unutarne ili vanjske strane staklene površine i prstena filtera.
2. Čuvajte filter u zaštitnoj vrećici kako biste spriječili nakupljanje prašine i promjenu boje uslijed izlaganja sunčevoj svjetlosti.
3. Filter je izrađen od lomljivog stakla pa se njime treba pažljivo rukovati!
4. Korisniku nije dopušteno mijenjati leće filtera.



PMD-ME145-22-HR
BIOPTRON FILTER IFU



BIOPTRON AG

SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU, SWITZERLAND
PHONE: +41 43 888 28 00 | E-MAIL: LIGHT@BIOPTRON.COM



WWW.BIOPTRON.COM

H R V A T S K I (H R)